

Bedienungsanleitung

Desinfektionsmittel- und Flüssigseifenspender SPE 500 mit integriertem Adapter und Bedienhebel

Passend für die Flaschenformen führender Desinfektionsmittel-Hersteller.

Vor der Montage beachten:

Packen Sie den Karton aus, entfernen Sie die Kunststoffverpackung des Spenders und achten darauf, dass folgende Teile enthalten sind:

- 1 Spender mit integriertem Adapter
- 1 Bedienhebel, der am Spender zu montieren ist
- 1 Wandplatte zur Wandmontage (nicht nötig, wenn bereits eine passende Rückwand vorhanden und montiert ist)
- 1 Tropfschale (zum Aufstecken nach der Spendermontage)
- 1 Beutel mit je einem Dreier-Set Schrauben und Dübel sowie einem Metallstreifen
- 1 Bedienungsanleitung deutsch

Hinweis: Vor Montage die Position des Spenders bestimmen

- Falls gewünscht, über einem Waschbecken anbringen (nicht notwendigerweise, weil Tropfschale integriert ist)
- Montagehöhe über einem Waschbecken: ca. 15 bis 20 cm (Unterkante Spender)
- Montagehöhe an der Wand: ca. 120 cm (Fußboden bis Unterkante Spender)
- Falls Spender in Fluren montiert werden: Montagehöhe so wählen, dass die Spender nicht durch Stationswagen u. ä. beschädigt werden können


Gebinde	Größe	Art. Nr.
---------	-------	----------

SPE 500		
---------	--	--

Wandspender mit integriertem ESH-Adapter	500 ml	00-918-007
--	--------	------------

Spender komplettieren und Spendermontage


①

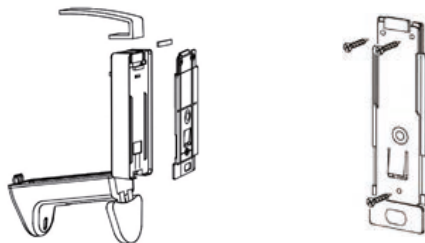

Der Spender wird aus Platzgründen mit demontiertem Bedienhebel geliefert. Zur Montage auf der Spenderrückseite den Bedienhebel einsetzen und eindrücken, bis er hörbar einrastet; den Metallstreifen einsetzen (dient zur Sicherung des Bedienhebels und gleichzeitig als oberer Befestigungspunkt des Spenders auf der Wandplatte). Wandplatte mit Dübeln und Schrauben befestigen. Spender von oben über die Wandplatte schieben, bis Verriegelungszunge hörbar einrastet.

Inbetriebnahme


②

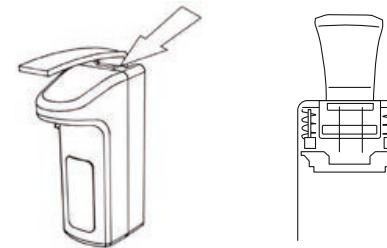

Spender öffnen, dazu auf den Druckknopf oben unter dem Bedienhebel drücken und Deckel nach vorne klappen.

Reinigung des Spenders

③

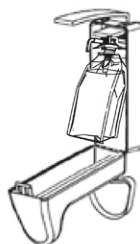

ESH Vacu-Bag mit integrierter Pumpe in das Gehäuse einsetzen; Gehäusedeckel schließen und Tropfschale aufstecken. Bei der ersten Verwendung den Bedienhebel mehrmals bis zum Anschlag niederdrücken, bis an der Pumpenspitze Flüssigkeit austritt. Diese in ein geeignetes Gefäß auffangen.

Der Spender ist grundsätzlich wartungsfrei, sollte aber aufgrund von Empfehlungen zur Infektionsvorsorge und Hygiene regelmäßig gereinigt und eventuell desinfiziert werden. Das **Gehäuse** nur mit mildem Reinigungsmittel säubern, falls gewünscht, mit Flächen-Desinfektionsmittel nachbehandeln. Das Gehäuse kann auch in einer geeigneten Spülmaschine gereinigt werden.

