


# Doppelt hält besser



**Unsere ULTRASOL OXY® Produktfamilie**  
Jetzt als Biozidprodukt und Medizinprodukt¹.  
Viruzid und sporizid. Für Routine und Ausbruchsfall.

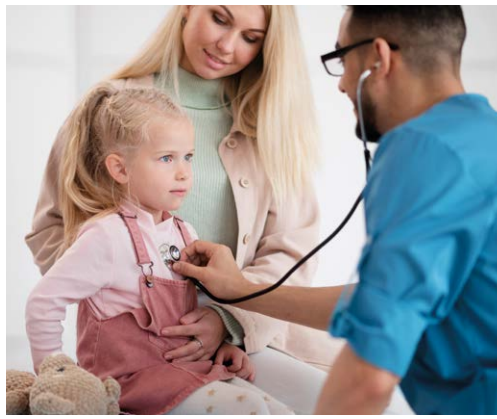

# Ein Produkt. Viele Einsatzfelder.

**Ob Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienst, Dialyse, ambulante Versorgung oder – im Infektions- und Ausbruchsfall – öffentliche Einrichtungen:** Überall dort, wo Flächen und invasive Medizinprodukte schnell wieder verfügbar sein sollen und gleichzeitig erhöhte hygienische Anforderungen gelten, ist eine Lösung gefragt, die Wirksamkeit und Alltagstauglichkeit zusammenbringt. Genau dafür ist **ULTRASOL OXY** konzipiert.

## Krankenhaus

Für patientennahe Flächen und anspruchsvolle Hygieroutinen

## Pflege

Für tägliche Abläufe und Situationen mit erhöhtem Infektionsrisiko

## Rettungsdienst

Für Einsätze, in denen Geschwindigkeit und Verlässlichkeit zählen

## Arztpraxis und ambulante Versorgung

Für häufig genutzte Kontaktflächen und klar strukturierte Hygieroutinen

## Neonatalogie und Dialyse

Für hygienesensible Umgebungen mit besonders hohem Anspruch an Verlässlichkeit

## Öffentliche Einrichtungen

Für Ausbruchseignisse, in denen eine schnelle Flächen-desinfektion zur Infektionseindämmung erforderlich ist

# Flexibel und wirtschaftlich einsetzbar.


**ULTRASOL OXY** eignet sich sowohl für die Routinedesinfektion als auch für den Ausbruchsfall. Damit kann häufig auf die Lagerung und Anwendung eines zusätzlichen Präparates verzichtet werden. Das vereinfacht Beschaffung, Lagerhaltung und Anwendung im Alltag.

**Routine und Ausbruch.**

Mit einem Produkt.

WO VERLÄSSLICHKEIT ZÄHLT

# Wenn Hygiene nicht warten kann.

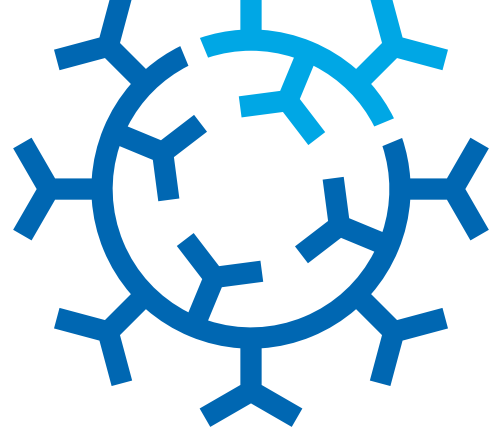


Wer Desinfektionsprodukte auswählt, prüft Wirksamkeit, Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Im Alltag kommt es zusätzlich auf Tempo, Klarheit und Materialverträglichkeit an. **ULTRASOL OXY** bringt das zusammen: **breites Wirkungsspektrum, kurze Einwirkzeiten, hohe Materialverträglichkeit**. Geprüft für anspruchsvolle Einsatzbereiche – von der Routine bis zu sensiblen medizinischen Anwendungen. Geeignet zur zeitsparenden Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art sowie von invasiven Medizinprodukten – mit oder ohne mechanische Einwirkung.



- ➔ **Breit wirksam**  
Viruzid und sporizid nach aktuellen Normen<sup>1</sup> – ein Produkt für Routine und Ausbruchsfall
- ➔ **Schnell im Einsatz**  
Kurze Einwirkzeiten<sup>1</sup> – kein Nachwischen nötig
- ➔ **Materialverträglich**  
Hohe Material- und Produktkompatibilität durch oxidative Basis
- ➔ **Abbauprodukte im Blick**  
Die aktiven Wirkstoffe Peressigsäure und Wasserstoffperoxid zerfallen in Sauerstoff, Wasser und Essigsäure.

**ULTRASOL OXY** ist phenol- und aldehydfrei und auf Biokompatibilität nach EN ISO 10993-1 getestet.

<sup>1</sup> Siehe Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten auf der Rückseite.

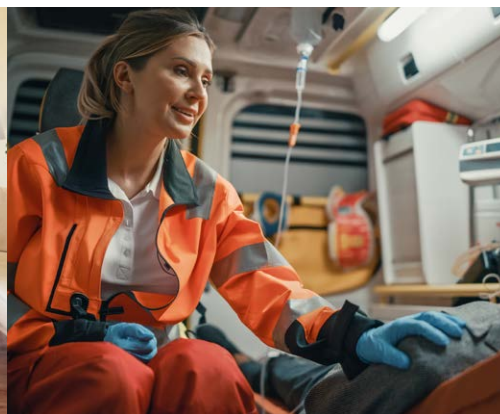

### Oxidative Wirkstoffbasis

Die aktiven Wirkstoffe Peressigsäure und Wasserstoffperoxid zerfallen in Sauerstoff, Wasser und Essigsäure. Phenol- und aldehydfrei.

## Wirkt schnell.

**Kurze Einwirkzeiten** für Abläufe, die keine langen Unterbrechungen erlauben.

## Wirkt breit.

Breites Wirkungsspektrum mit relevanten Wirksamkeiten **für erhöhte Anforderungen.**

- **bakterizid**
- **levurozid**
- **tuberkulozid**
- **mykobakterizid**
- **fungizid**
- **viruzid**
- **sporizid**
- **Norovirus**
- **Adenovirus**
- **Polyomaviren**  
Inklusive SV 40 und HPV

- **Begrenzt viruzid PLUS**  
ULTRASOL OXY in 1 Minute nach EN 14476  
ULTRASOL OXY WIPES und XL in 5 Minuten nach EN14476
- **Viruzid**  
in 5 Minuten nach EN 14476
- **Bakterizid**  
ULTRASOL OXY in 1 Minute nach EN 13624, EN 13727, EN 16615  
ULTRASOL OXY WIPES und XL in 5 Minuten nach EN 13624, EN 13727, EN 16615
- **Tuberkulozid**  
in 5 Minuten nach EN 14348
- **Wirksam gegen Clostridioides difficile**  
innerhalb von 5 Minuten nach EN 17126, EN 17846
- **Sporizide Flächendesinfektion**  
inklusive B. subtilis und B. cereus  
innerhalb von 15 Minuten nach EN 17126

**Für Routine und Ausbruchsfall.**

Für Bereiche, in denen Wirksamkeit  
schnell verfügbar sein muss.

# Unterschiedliche Anforderungen. Die passende Form.



Unterschiedliche Anwendungsbereiche stellen unterschiedliche Anforderungen.

**ULTRASOL OXY** passt sich an: als gebrauchsfertige Flüssigdesinfektion und als vorgetränkte Tücher in zwei Größen.

Für verlässliche Desinfektion, die schnell verfügbar ist und Hygieneroutinen effizient hält.

Als Lösung.



Als Wipes.



Als Wipes XL.



## ULTRASOL OXY®

Gebrauchsfertige Lösung  
für Reinigung und Desinfektion

## ULTRASOL OXY® WIPES

Vorgetränkte Tücher für schnelle  
und komfortable Anwendungen

## ULTRASOL OXY® WIPES XL

Größere Tücher  
für größere Flächen

Wischen. Trocknen. Weiter.

Desinfizierte Flächen können unmittelbar

nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wirksamkeit nach den angegebenen Einwirkzeiten gemäß Gebrauchsanweisung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# Wischen. Trocknen. Weiter.

## Testen Sie **jetzt!**



**Kennenlernen?**

**Produktmuster anfordern!**

[www.ultrasol-oxy.de](http://www.ultrasol-oxy.de)

05664 9496-5229

[ultrasol-oxy@schumacher-online.com](mailto:ultrasol-oxy@schumacher-online.com)

### Produktübersicht

In den folgenden Tabellen finden Sie die Informationen zu Wirkungsspektrum, Einwirkzeiten, Gebinde, Verpackungseinheiten und Inhalt. Um Ihnen den Bestellvorgang zu erleichtern, finden Sie dort zudem die EAN und PZN sowie unsere Artikelnummer.

#### Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten ULTRASOL OXY® WIPES und XL

|                                                             | <b>PREVENT</b> | <b>PRESERVE</b> | <b>PROTECT</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion                | 5 min          | 5 min           | 5 min          |
| Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion |                |                 | 5 min          |
| Anwendungsempfehlung gegen Clostridioides difficile         |                |                 | 5 min          |
| Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion     |                |                 | 15 min         |

#### Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten ULTRASOL OXY®

|                                                                                   | <b>PREVENT</b>                           | <b>PRESERVE</b>                          | <b>PROTECT</b>                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit und ohne Mechanik                | 1 min <sup>1</sup><br>5 min <sup>2</sup> | 1 min <sup>1</sup><br>5 min <sup>2</sup> | 5 min <sup>1</sup><br>5 min <sup>2</sup> |
| Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion mit und ohne Mechanik |                                          |                                          | 5 min                                    |
| Anwendungsempfehlung gegen Clostridioides difficile mit und ohne Mechanik         |                                          |                                          | 5 min                                    |
| Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion mit und ohne Mechanik     |                                          |                                          | 15 min                                   |

| Produkt                       | Gebinde          | VE | Inhalt     | Art. Nr.       | EAN           | PZN      |
|-------------------------------|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------|
| <b>ULTRASOL OXY®</b>          | Flasche          | 6  | 2L         | 00-270-020     | 4064791012228 | 18703104 |
| <b>ULTRASOL OXY® WIPES</b>    | Packung          | 6  | 72 Tücher  | 00-270-To72    | 4064791016202 | 20131945 |
| <b>ULTRASOL OXY® WIPES XL</b> | Standbodenbeutel | 4  | 120 Tücher | 00-270-OSEB120 | 4064791012365 | 18703096 |

<sup>1</sup> Wischdesinfektion. <sup>2</sup> Sprühdesinfektion. **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.